


# InBody3.0 프린터 호환리스트


InBody3.0 Version을 확인해야 합니다.

1. Version 확인하는 방법

A. 대기화면에서 Setup 버튼 누름.

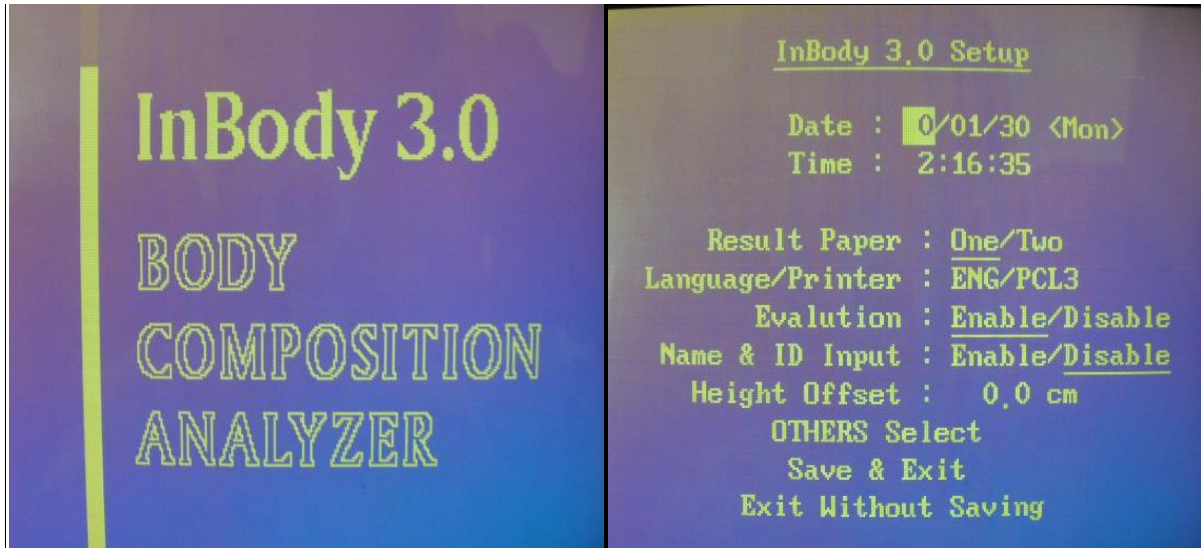

B. Setup1 과 ▶ 를 동시에 누름. 하단의 버전을 확인.

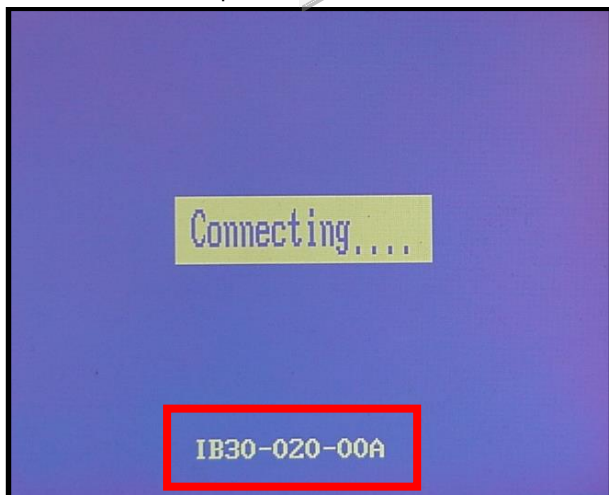

2. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- A. [IB30\(A\)-010 ~ IB30\(A\)-022 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- B. [IB30\(A\)-023 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

3. IB30(A)-010 ~ IB30(A)-022 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
삼성	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1745		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1750		PCL6	USB/Parallel	단종

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

4. IB30(A)-023 이후 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
삼성	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1745		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1750		PCL6	USB/Parallel	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>	
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

1) 한글  
로고  
출력 X  
2)  
결과지  
참고사항  
변경 X